

Система Incognito Lite с шиной




A great way to
your new smile

3M Unitek

Брекет-система Incognito Lite

Новая конструкция шины


опорные площадки не
соединены между собой

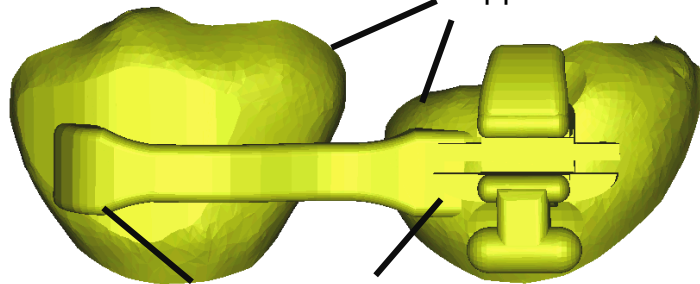

Сила передается также, как и
посредством брекетов



Гибкая балка

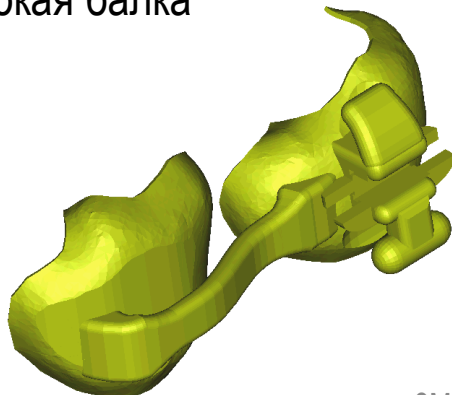

Шина на 4-5



Шина на 4-6

Показания к применению Incognito Lite

- 1) Когда использовать (или не использовать) Incognito Lite 3-3 ? Приведите примеры удачного применения Incognito Lite 3-3?
- 2) Когда использовать (или не использовать) Incognito Lite 4-4 ? Приведите примеры удачного применения Incognito Lite 4-4?
- 3) Когда использовать Incognito Lite с дополнительной шиной?

	Lite 3-3	Lite 4-4	Lite с дополнительной шиной
1	Минимальная скученность резцов, без клыков, обычно случаи без наклона зубов	Незначительная или средняя скученность резцов, наклон клыков	Средняя или выраженная скученность в переднем участке зубной дуги без вовлечения жевательных зубов Лечение с удалением премоляров
2	Средняя степень скученности в переднем отделе зубной дуги, с ротациями, без наклонов	Скученность в переднем участке зубной дуги, наклоны зубов	Предотвращение ротации клыков/премоляров (промежутки в переднем участке зубной дуги)
3	Нивелирование нижних резцов, без клыков Верхняя челюсть: Риск класса II вследствие накусывания на верхние брекеты Средняя степень скученности в переднем отделе зубной дуги	Нивелирование переднего участка (включая клыки) Средняя степень скученности в переднем участке зубной дуги, включая перемещение клыков Закрытие промежутков в переднем участке зубной дуги	В случаях приложения больших сил для стабилизации премоляров при создания места в переднем участке